




C4300

WÓZKOWANNA HYDRAULICZNA

Wózkowanna służy do bezpiecznego i wygodnego transferu pacjenta z łóżka pod prysznic. Umożliwia łatwe i komfortowe przeniesienie osoby, zapewniając jednocześnie wysoki poziom higieny i wygodę podczas mycia.

 ≤ 155 kg



konserwacja 

TRANSFER

- Transfer pacjenta jest ułatwiony dzięki niskiej pozycji 52 cm.
- Po podjechaniu wózkowanną blisko łóżka, transfer może być wykonany przez jedną osobę.



Model

Numer produktu

Wózkowanna hydrauliczna

C4300

Wózkowanna hydrauliczna + centralny hamulec

C430001

GLÓWNE CECHY

- Regulowana wysokość od 52 do 88 cm, system hydrauliczny uruchamiany pedałem nożnym dwustronnym
- Pokrycie z niebieskiego PVC (poliester powlekany, pikowany) o grubości 2 cm, zamocowane na płycie wodoodpornej typu Compact
- Barierki przy głowie i stopach
- Powierzchnia do leżenia: 178 cm × 60 cm
- Osłona podstawy wykonana z tworzywa ABS
- Szeroka podstawa (71,5 cm) zapewniająca lepszą stabilność
- Zamykanie odpływu wody (korek spustowy) oraz rura odprowadzająca wodę z mocowaniem na klips



ZALETY PRODUKTU

KOMFORT

Regulowana wysokość umożliwia personelowi medycznemu pracę w ergonomicznej pozycji, co zmniejsza ryzyko bólu pleców.

BEZPIECZEŃSTWO

Boczne barierki ochronne o wysokości 20 cm zapewniają pełne bezpieczeństwo pacjenta.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Konstrukcja wykonana z malowanej stali, odpornej na korozję.



Łatwy w użyciu odpływ wody. Powierzchnia z nachyleniem 2°



Opcjonalny system z centralną blokadą kół (z czterema kołami o średnicy 125 mm, w tym jednym kołem skrętnym)

PODUSZKA CYLINDRYCZNA

Wysokość 9,9 cm, długość 49,7 cm, szerokość 20,2 cm




MATERAC DO WÓZKOWANNY

Wysokość 18 cm

BARIERKI

Barierki profilowane, składane, o wysokości 20 cm

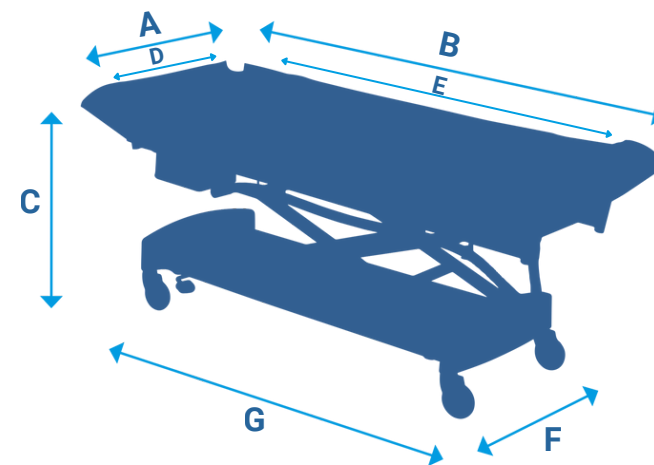

A SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (z barierkami)	B DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (z barierkami)	C ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI	D SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA (powierzchnia leżenia)	E DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA (powierzchnia leżenia)	F SZEROKOŚĆ PODSTAWY	G DŁUGOŚĆ PODSTAWY	ŚREDNICA KÓŁ	WAGA CAŁKOWITA URZĄDZENIA
74 cm	198 cm	52 - 88 cm	60 cm	178 cm	62 cm	170 cm	Ø100 mm - hamulce niezależne Ø125 mm - hamulec centralny	79 kg - bez centralnej blokady kół 85 kg - z centralną blokadą kół