



SPRZĘT MEDYCZNY

SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA

USŁUGI DODATKOWE

MATERACE I PODUSZKI PRZECIWO DLEŻYNOWE

■ Opieka ■ Bezpieczeństwo ■ Komfort

WIN  CARE



Podpórka do unoszenia stopy ALOVA™



Ułożenie pacjenta w łóżku przy pomocy poduszek pozycjonujących

SPIS TREŚCI



MATERACE



PODUSZKI



PODUSZKI
POZYCJONUJĄCE



4

Materac
APLOT®



7

Materac
**AXTAIR
AUTOMORPHO®
AXENSOR®**




5

Materac
**ALOVA®
Z PODPRACIEM
STÓP**



8

Poduszka
ALOVA™

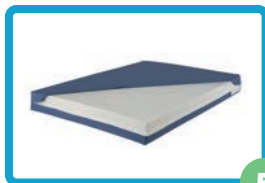


5

Materac
**ALOVA™
XXL**



8

Poduszka
KINERIS®

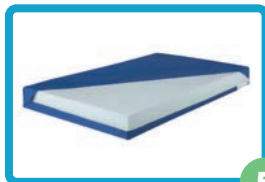

5

Materac
NOVA FORM



9

Podpórki
ALOVA™



6

Materac
AXTAIR ONE® PLUS



9

POZYCJONERY



6

Materac
**AXTAIR
AUTOMORPHO®
PLUS**



Szpital



Dom opieki



Opieka domowa



Kod QR:
Karta produktu
Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności



APLOT

Rekomendowane dla



OPIS PRODUKTU:

- materac Aplot ma budowę gofrową i wykonany jest z pianki
- materac Aplot przeznaczony jest dla pacjentów o ryzyku odleżyn: niskim i średnim, którzy pozostają w łóżku do 15 godzin na dobę
- posiada ścięte rogi materaca i zaokrąglone kształty komórek
- dostępne pokrowce: Promust PU i Promust PU HD

Dane techniczne:

- waga pacjenta: od 40 do 120 kg
- wymiary: 195x85x14 cm
- twardość: 4,5 kPa
- gęstość: $\geq 34 \text{ k/m}^3$
- waga materaca: 8,5 kg

Gwarancja: 2 lata

Producent: WinnCare France (SA)

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:




Struktura materaca Aplot®



ALOVA

Rekomendowane dla

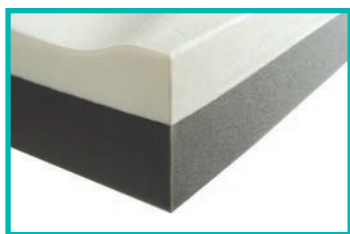

Struktura materaca Alova®

OPIS PRODUKTU:

- materace Alova® wykonane są z pianki wiskoelastycznej
- materace Alova® przeznaczone są dla pacjentów z ryzykiem odleżyn: średnim i wysokim, którzy przebywają w łóżku dłużej niż 15 godzin na dobę
- materac Alova występuje w wersjach:
 - Alova® z podparciem stóp
 - Alova™ XXL

Gwarancja: 2 lata

Producent: WinnCare France (SA)



Alova® z pianki z pamięcią



ALOVA Z PODPARCIEM STÓP



Dane techniczne:

- waga pacjenta od 20 do 180 kg (3 wersje: do 120 kg, do 150 kg, do 180 kg)
- wymiary 195x88x14 cm
- gęstość warstwy wierzchniej 6 cm $\geq 75 \text{ kg/m}^3$
- gęstość warstwy dolnej 8 cm od 18 do $\geq 34 \text{ kg/m}^3$
- pokrowce Promust PU, Promust PU HD i CiC
- waga materaca do 16 kg

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:



ALOVA XXL



Dane techniczne:

- waga pacjenta od 135 do 270 kg
- wymiary 195x117x17 cm i 198x137x17 cm
- gęstość warstwy wierzchniej 7 cm $\geq 75 \text{ kg/m}^3$ i twardość 1,7 kPa
- gęstość warstwy dolnej 10 cm 42 kg/m^3 o twardości 4,5 kPa
- waga materaca do 38,9 kg
- pokrowce Promust PU, Promust PU HD.

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:



NOVA FORM



Opis produktu:

- waga pacjenta od 30 do 160 kg
- stworzony do zapobiegania ryzyku odleżyn średniego i wysokiego stopnia
- skierowany jest dla pacjentów wstających w ciągu dnia, pozostających w łóżku dłużej niż 15 godzin dziennie
- składa się z dwóch sklejonych ze sobą warstw:
 - podstawy z pianki wysokoelastycznej $\geq 34 \text{ kg/m}^3$
 - warstwy wierzchniej o grubości $\geq 75 \text{ kg/m}^3$ pianka wiskoelastyczna
- materac pokryty jest w pełni wodoodpornym pokrowcem wykonanym z PROMUST (składa się z poliuretanu i poliestru)
- przeznaczony jest do łóżek o szerokościach: 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140 i 160 cm
- dostępne pokrowce: Promust PU HIP, Promust PU HIP3, Promust PUHD HIPH, Promust CIC



AXTAIR ONE PLUS

Rekomendowane dla



OPIS PRODUKTU:

- materac zmiennociśnieniowy o działaniu przeciwoleżynowym oraz wspierający proces leczenia już powstałych odleżyn
- materac Axtair One® Plus przeznaczony jest dla pacjentów o ryzyku odleżyn: średnim i wysokim, którzy pozostają w łóżku ponad 15h na dobę
- materac składa się z:
 - 18 niezależnych i wyjmowanych komór o wysokości 12 cm
 - bazy z pianki o wysokości 5 cm
 - pompy oraz pokrowca
- pompa ma tryb: dynamiczny (terapeutyczny) i siedzący
- pompa ma system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta
- materac posiada zawór CPR
- dostępne pokrowce: Promust PU i Promust CIC (z jonami srebra)

Dane techniczne:

- waga pacjenta: od 30 do 165 kg
- wymiary: 195x87x17 cm
- waga materaca: 8 kg
- wymiary pompy: 22x25x11,5 cm
- waga pompy: 2,7 kg - waga pacjenta: od 30 do 165 kg
- wymiary: 195x87x17 cm
- waga materaca: 8 kg
- wymiary pompy: 22x25x11,5 cm
- waga pompy: 2,7 kg

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:



Gwarancja: 2 lata

Producent: WinnCare France (SA)



AXTAIR AUTOMORPHO PLUS

OPIS PRODUKTU:

- materac zmiennociśnieniowy o działaniu przeciwoleżynowym oraz wspierający proces leczenia już powstałych odleżyn
- materac Axtair Automorpho® Plus przeznaczony jest dla pacjentów o ryzyku odleżyn: średnim i wysokim, którzy pozostają w łóżku ponad 15h na dobę
- materac składa się z:
 - 18 niezależnych i wyjmowanych komór o wysokości 12 cm, w tym 2 komór statycznych pod głową, przykrytych poduszką oraz 4 komór pozwalających na odciążenie stóp
 - bazy z pianki o wysokości 5 cm (w oddzielnym zintegrowanym pokrowcu)
 - pompy oraz pokrowca
- 3 tryby pompy: dynamiczny, statyczny (nisko-ciśnieniowy), pielęgnacyjny
- pompa ma system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta
- materac jest dostępny w 3 rozmiarach do łóżek o szerokościach 90, 100 i 120 cm
- posiada zawór CPR
- dostępne pokrowce: Promust PU HD i CIC (z jonami srebra)

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 30 do 180 kg
- wymiary 195x87x17 cm
- waga materaca do 8 kg
- wymiary pompy 22x25x11,5 cm
- waga pompy 2,7 kg

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:



Rekomendowane dla



Gwarancja: 2 lata

Producent: WinnCare France (SA)




AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR

Rekomendowane dla



OPIS PRODUKTU:

- materac zmiennociśnieniowy o działaniu przeciwoleżynowym oraz wspierający proces leczenia już powstałych odleżyn
- materac Axtair Automorpho® Axensor® przeznaczony jest dla pacjentów o ryzyku odleżyn: średnim i wysokim, którzy pozostają w łóżku ponad 15 godzin na dobę
- 3 tryby pompy: dynamiczny, statyczny (nisko-ciśnieniowy), pielęgnacyjny
- pompa ma system automatycznego i stałego obliczania ciśnienia pompowania zgodnie z budową ciała i pozycji pacjenta w łóżku
- materac posiada zawór CPR
- rodzaje materaca Axtair Automorpho® Axensor®:
 - 18 komorowy, dla pacjentów 30-165 kg, wys. 12 cm + baza z pianki 5 cm (w oddzielnym zintegrowanym pokrowcu)
 - 18 komorowy, dla pacjentów 30-180 kg, wys. 15,5 cm + baza z pianki 5 cm (w oddzielnym zintegrowanym pokrowcu) występuje w wersji do pozycji na brzuchu
 - 21 komorowy, dla pacjentów 30-200 kg, wys. 20cm
 - 21 komorowy, dla pacjentów do 270 kg, wys. 20 cm w wersji XXL o szerokości 117 cm
- materac posiada pokrowiec CIC (z jonami srebra)

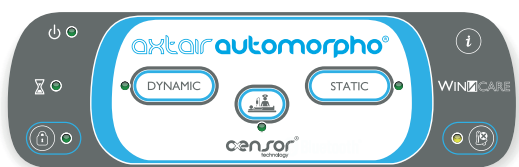


Dane techniczne:

- waga pacjenta od 30 do 165 kg
- wymiary 195x87x17 cm lub 195x97x17 cm
- waga materaca do 10 kg
- wymiary pompy 22x25x11,5 cm
- waga pompy 2,7 kg

Gwarancja: 2 lata

Producent: WinnCare France (SA)

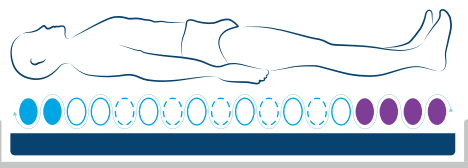

3 strefy terapeutyczne:

- 2 statyczne komory umiejscowione w okolicach głowy
- 12 zmiennych komór umiejscowionych w części sacrum
- 4 niezależne komory w okolicach stóp

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:



Konserwacja i czyszczenie pokrowców:

Pokrowiec Promust PU



Pokrowiec Promust PU HD



Pokrowiec Promust CIC





KINERIS

Rekomendowane dla



OPIS PRODUKTU:

- pneumatyczna poduszka Kineris® przeznaczona jest dla pacjentów, którzy przebywają na wózku inwalidzkim od 8 do 10 godzin dziennie, u których występuje ryzyko powstania odleżyn
- posiada pokrowiec z materiału TREVIRA CS
- poduszka Kineris® występuje w dwóch wersjach:
 - 1 – komorowa, 7 cm wysokości, dla pacjentów bez problemów z utrzymaniem równowagi
 - 2 – komorowa, 10 cm wysokości, dla pacjentów z problemem utrzymania równowagi
- w zestawie z poduszką jest pompka z manometrem

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 40 do 120 kg
- wysokość poduszki 7 i 10 cm
- szerokość poduszki od 28,5 do 46,5 cm
- głębokość poduszki od 28,5 do 46,5 cm

Gwarancja: 3 lata

Producent: Winncare France (SA)

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:



Manometr



Kineris® 2 - komorowa



ALOVA PODUSZKA

Rekomendowane dla



OPIS PRODUKTU:

- poduszka Alova™ przeznaczona jest dla pacjentów, u których występuje ryzyko wystąpienia odleżyn od średniego do wysokiego
- wykonana jest z pianki wiskoelastycznej
- posiada pokrowiec Promust PU z podłożem antypoślizgowym
- poduszka Alova™ występuje w dwóch wersjach: z wycięciem na kość guziczną oraz z podparciem miednicy
- poduszka Alova™ jest dostępna w 16 rozmiarach

Dane techniczne:

- waga pacjenta od 30 do 200 kg
- wysokość poduszki od 6 do 12 cm
- szerokość poduszki od 36 do 60 cm
- głębokość poduszki od 36 do 50 cm

Gwarancja: 3 lata

Producent: Winncare France (SA)

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej:



Alova™ z podparciem miednicy



Alova™ z wycięciem na kość guziczną



Alova™ z pianki z pamięcią



ALOVA PODPÓRKI

Rekomendowane dla



Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:



OPIS PRODUKTU:

Podpórki pozycjonujące zmniejszają i łagodzą nacisk na obszary ciała obarczone ryzykiem odleżyn.

Gwarancja: 2 lata



Podpórka do unoszenia stopy

- pomoc w zapobieganiu i leczeniu odleżyn pięty
- całkowite odciążenie pięty
- ortopedyczne ustawienie kończyny dolnej
- wielokrotnego użytku, pokrowiec CIC



Stabilizator pięty

- pomaga w zapobieganiu i leczeniu odleżyn pięty
- całkowite odciążenie pięty
- wielokrotnego użytku, pokrowiec CIC



Duża podpórka pod piętę

- pozwala na odciążenie pięty zgodnie z osią fizjologiczną kończyny dolnej
- noga spoczywa równomiernie na tyłde, zmniejszając podparcie na ścięgnie Achillesa i kostce
- wielokrotnego użytku, pokrowiec Promust HD



Podpórka pod piętę w nogach łóżka

- pozwala na odciążenie pięty zgodnie z osią fizjologiczną kończyny dolnej
- wielokrotnego użytku, pokrowiec Promust HD



Podpórka do pozycji leżącej pół-bocznej

- odciąża punkty nacisku w okolicy krętarza i kości krzyżowej w pozycji pół-bocznej pod kątem 30°
- wielokrotnego użytku, pokrowiec Promust HD



Mała podpórka pod piętę

- całkowite odciążenie pięty
- zastosowanie tylko dla jednego pacjenta, bez pokrowca



POZYCJONERY

Rekomendowane dla



OPIS PRODUKTU:

- poduszki pozycjonujące umożliwiają szybką i łatwą zmianę pozycji pacjenta
- różne wielkości i kształty poduszek pozycjonujących pozwalają na ułożenie pacjenta w różnych pozycjach
- poduszki wypełnione są mikrogranulkami ze styropianu samogasnącego
- zgrzewane są ultradźwiękowo, tworząc nieprzemakalną zaporę dla cieczy
- pokrowce CIC z jonami srebra, zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów i są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu ze skórą

Gwarancja: 2 lata

Producent: WinnCare France (SA)

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:





POZYCJONERY

Rekomendowane dla



Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:



Poduszka w kształcie półkoła
60x35 cm



Poduszka uniwersalna średnia
56x40 cm



Poduszka cylindryczna
Ø 21x60 cm



Poduszka pod łokieć
39x21 cm



Poduszka pod piętę
39x21 cm



Poduszka do pozycji leżącej półbocznej
170x74 cm lub 182x54 cm



Poduszka w kształcie półksiężyca
137x80 cm



Poduszka okrągła
46x46 cm



Poduszka odwodząca
35x28cm



Poduszka uniwersalna mała
37x26 cm

Przykładowe zastosowanie poduszek pozycjonujących w układaniu pacjenta



KONTAKT

Siedziba

Winnicare Polska Sp. z o.o.
ul. Lubska 17
PL 68-320 Jasień

T: +48 68 371 10 45
E: biuro@winnicare.pl

NIP: 9281993580
VAT EU: PL9281993580
REGON 140793644

Biuro Handlowe

Winnicare Polska Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 276 D
90-361 Łódź

T: +48 68 371 10 45
E: sales@winnicare.pl



Dariusz Olipra
DYREKTOR HANDLOWY
T: +48 518 334 647
E: dol@winnicare.pl

Nasi przedstawiciele



Arkadiusz Głapka
KEY ACCOUNT SPECIALIST
T: +48 453 017 659
E: agl@winnicare.pl



Jakub Jasiński
KEY ACCOUNT SPECIALIST
T: +48 573 879 220
E: jas@winnicare.pl



Dariusz Bogdanowicz
KEY ACCOUNT SPECIALIST
T: +48 511 037 447
E: dbg@winnicare.pl



Łukasz Kurpisz
KEY ACCOUNT SPECIALIST
T: +48 509 296 220
E: lku@winnicare.pl

Znajdź nas:



Winnicare Polska



Winnicare Polska



Winnicare Polska



[akademia.winnicare](https://www.instagram.com/akademia.winnicare)



www.akademia.winnicare.pl

WIN CARE

■ Opieka ■ Bezpieczeństwo ■ Komfort

www.winncare.pl