

AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS




OPIS PRODUKTU

- Materac Axtair Automorpho® Plus został stworzony w celu zapobiegania i leczenia już istniejących odleżyn u pacjentów o średnim i wysokim ryzyku, przebywających w pozycji leżącej przez więcej niż 15 godzin dziennie.
- Waga pacjenta od 30 kg od 165 kg.
- Łatwy w użyciu dla opiekunów.
- Możliwość wykonania technicznej autodiagnostyki według kodu QR.
- Możliwy transport w torbie transportowej.
- Przyjazny dla środowiska - zrealizowany jako eko-projekt.

Materac zmiennociśnieniowy:

- 18 niezależnych, wypełnionych powietrzem komór z poliuretanu Ether, ruchomych, o wysokości 12 cm
- Zagłówek: 2 statyczne komory przykryte poduszką
- Strefa stóp: 4 komory pozwalające na odciążenie stóp
- Stelaż z pianki polieterowej o grubości ponad 5 cm, umieszczone w oddzielnej przegrodzie
- Zawór reanimacyjny CPR
- Funkcja transportowa
- Tunel na kabel - w opcji

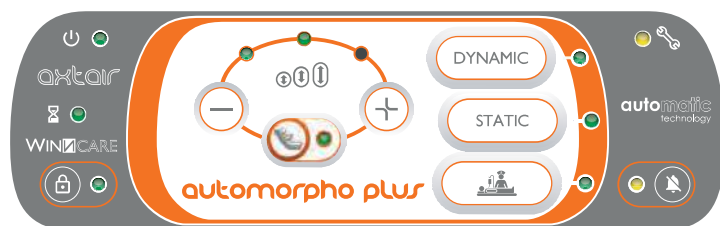

Dostępne pokrowce:

- Strona zewnętrzna: bi-elastyczna, nieprzepuszczająca cieczy i paroprzepuszczalna
- Strona wewnętrzna: podstawa antypoślizgowa
- Dostępne 2 pokrowce:
 - > PROMUST PU HD (w kolorze czarnym)
 - > PROMUST CIC (w kolorze niebieskim)

Pompa:

- Opatentowany system automatycznego i stałego obliczania ciśnienia pompowania
- 3 tryby działania: dynamiczny, statyczny nisko-ciśnieniowy, terapeutyczny
- Sterowanie pozycją siedzącą
- Regulowanie wygodnego ułożenia, bez względu na tryb i pozycję pacjenta
- Alarmy wizualne i dźwiękowe
- Numer serii z tyłu kompresora, uproszczona instrukcja obsługi i kod QR po bokach

NAZWA	NR REFERENCYJNY	WYMIARY / WAGA	WAGA PACJENTA	NORMY DOTYCZĄCE ZAPALNOŚCI	CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (pompa + materac) Pokrowiec całościowy z Promust PU HD Dla łóżka o szerokości 90 cm	VAXT4/AUTO-P	195 x 87x17 cm 8kg	30 do 165 kg	EN 597-1 i 2 GPEM D1 90 Klasa D	<p>Materac zmiennociśnieniowy Zawór reanimacyjny CPR 18 niezależnych, wypełnionych powietrzem komór z poliuretanu Ether, ruchomych, o wysokości 12 cm 2 statyczne komory zagłówek z wygodną poduszką 4 komory pozwalające na odciążenie stóp w komplecie Ruchomy podkład z pianki polieterowej o grubości ponad 5 cm, umieszczone w oddzielnej przegrodzie (Gęstość 18 kg/m³; siła nośna 3,5 kPa)</p> <p>Pompa Wymiar: 22 x 25 x 11,5 cm Masa: 2,7 kg</p> <p>Tryb dynamiczny (naprzemienny): 1 komora na 2 Czas pełnego cyklu: 9 do 14 minut Opatentowany system automatycznego i stałego obliczania ciśnienia pompowania Indywidualne regulowanie wygodnej pozycji Alarmy wizualne i dźwiękowe Przepływ > 71 / min Zasilanie elektryczne: 220-240 V – 50 Hz Klasa II typ BF Średnie zużycie: 5 Wh Decybele pompy: Presja akustyczna zgodnie z NF EN3744: < 35 dBA</p> <p>Zgodność z wymogami elektrycznymi i elektromagnetycznymi, wg norm IEC 60601-1 Ed 3; IEC 60601-1-2</p>
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (pompa + materac) Pokrowiec całościowy z Promust CIC Dla łóżka o szerokości 90 cm	VAXT4/CIC-P				
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (pompa + materac) Pokrowiec całościowy z Promust PU HD Dla łóżka o szerokości 100 cm	VAXT4/AUTO100-P	195 x 97x17 cm 10kg			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (pompa + materac) Pokrowiec całościowy z Promust CIC Dla łóżka o szerokości 100 cm	VAXT4/CIC100-P				

Konserwacja: Pokrowiec Promoust PU HD i CIC



* w opcji inne wyposażenie **w opcji inne wymiary

Gwarancja 2 lata



Producent: WinnCare Group - 200 rue Charles Tellier – Actiparc de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France
Ph : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 – Email : contact.askle@winncare.fr - www.winncare.fr



Dążąc do stałego udoskonalania swoich produktów, firma ASKLÉ SANTÉ zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach / Fotografii nie stanowią wartości handlowej.

