

ELEKTRYCZNA **OBROTNIKA** ZASILANA PRZEZ PODNOŚNIK SUFITOWY LUNA; 4-KIERUNKOWA

Nowa elektryczna obrotnica Winncare to idealne rozwiązanie do zmiany kierunku na skrzyżowaniu szyn. Zasilana jest przez podnośnik sufitowy Luna, bez potrzeby oddzielnego zasilania.




System bezdotykowy

Automatyczny system jest prosty i inteligentny; po prostu ustaw Lunę na środku obrotnicy, która po dwóch sekundach zostanie aktywowana przez podnośnik sufitowy i automatycznie zacznie się obracać. Nie ma żadnych dodatkowych przewodów/sznurków, dzięki czemu opiekun jest w stanie skupić całą uwagę na komforcie pacjenta podczas przenoszenia.



Płynna i intuicyjna zmiana kierunku

Elektryczna obrotnica obraca się płynnie przy minimalnym hałasie. Cztery diody LED wskazują stan aktywności. Po umieszczeniu Luny na środku obrotnicy, po dwóch sekundach cztery diody zmienią kolor z zielonego na czerwony, co oznacza, że system zacznie się obracać.

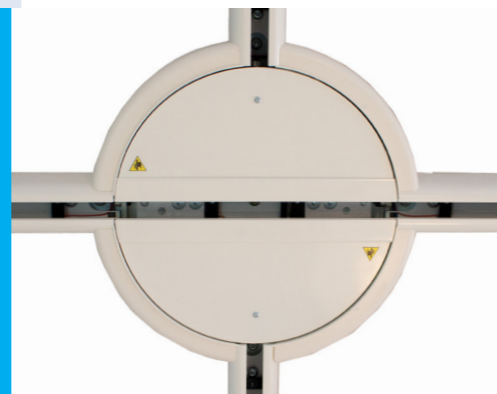

Łatwa integracja

Elektryczna obrotnica jest kompatybilna z podnośnikiem sufitowym Luna 200 lub 275 kg, zamontowana na wózku z bagnetem z przeniesieniem mocy. Obrotnica może być łatwo montowana i wdrażana we wszystkich systemach jednotorowych, a przy odpowiedniej konfiguracji szyn może być również montowana w systemach XY. Napędzana elektrycznie obrotnica występuje w dwóch wariantach - jeden dla pojedynczej Luny i jeden dla wielu podnośników.

