

POOL E-185®

Podnośnik basenowy



OPIS PRODUKTU

- Podnośnik basenowy POOL E-185® umożliwia przenoszenie osoby z wózka inwalidzkiego lub z podłoża do basenu.
- Podnośnik jest bardzo ergonomiczny, jest składany. Posiada szeroki uchwyt, jego zakres podnoszenia to 2.10 m.
- Ramię podnośnika obraca się o 360°. Silnik i materiały są firmy LINAK.
- Konstrukcja zrobiona jest ze stali nierdzewnej i jest pokryta nylonem.
- Akumulator w podnośniku basenowym może być odłączany i naładowywany na podnośniku lub za pomocą zewnętrznej ładowarki.
- Podnośnik basenowy POOL E-185® może być montowany na każdym rodzaju basenu, zarówno na pływalniach krytych jak i basenach otwartych.


Podnośnik basenowy POOL E-185® jest odpowiedni dla pacjentów ważących do 185 kg.



GŁÓWNE CECHY PRODUKTU



Wieszak

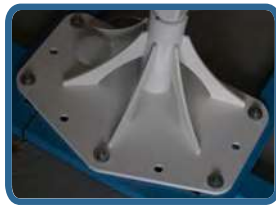

Podstawa do przykręcenia bezpośrednio do podłoża




Krzeselko



Nosze





- Podnośnik basenowy POOL E-185® zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wygodę użytkownika
- Sterownik z wyłącznikiem awaryjnym i wbudowanym wskaźnikiem obciążenia
- Alarm dźwiękowy: ostrzeżenie, gdy akumulator jest na wyczerpaniu
- Elektryczny system awaryjnego opuszczania.
- 2 podstawy obrotowe: do osadzenia w betonie, do przykręcenia bezpośrednio do podłoża
- Akcesoria: specjalne nosze do użytku w basenie, specjalne krzesło do użytku w basenie
- Akumulator posiada: wskaźnik ładowania, przycisk zatrzymania, awaryjne opuszczanie elektryczne
- Podnośnik basenowy POOL E-185® jest zgodny z normą EN ISO 10525:2007 mającą zastosowanie do podnośników do przenoszenia osób niepełnosprawnych.

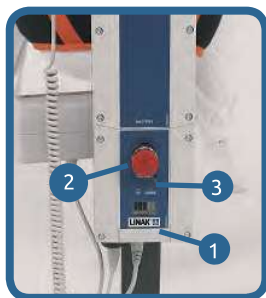

Odczepiany akumulator

Akumulator posiada:

1. wskaźnik ładowania
2. przycisk zatrzymania
3. awaryjne opuszczanie elektryczne

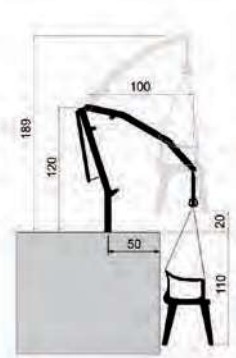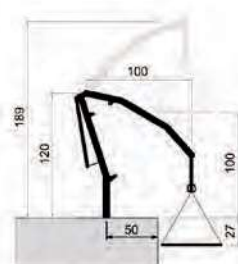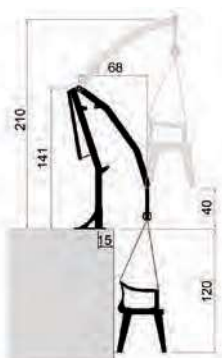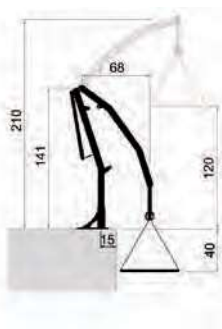

Nazwa	Nr referencyjny	Max. waga pacjenta	Normy	Sterownik
POOL E-185	102102006	185 kg	ISO 10535 EN 12182	LINAK IP 66

Zdalne sterowanie, części elektryczne i mechaniczne: 5-letnia gwarancja

Akumulatory, pasy i jednostka ważenia: 1 rok



Producent: WinnCare Group, Ctra. Masía del Juez 37b, 46909 Torrent Valencia - SPAIN,
Tel: +34 9 61 56 55 21, Fax: +34 9 61 56 03 83, E-mail: info@winnCare.es
www.winnCare.com

WINNCARE
g r o u p e

