

## SOLAR 185

UNIWERSALNY, ERGONOMICZNY PODNOŚNIK JEZDNY O UDŹWIGU 185 KG

### ZASTOSOWANIE

- Przenoszenie pacjenta z łóżka na krzesło lub z krzesła na wózek inwalidzki.
- Podnoszenie z podłogi, na przykład po upadku

### OPIS PRODUKTU

- Wymienny wieszak bez użycia narzędzi. Możliwość wymiany na 2-, 3- i 4- punktowy wieszak.
- Konstrukcja i kształt ramienia podnoszącego zapewnia pacjentowi więcej przestrzeni przy podnoszeniu.
- Zakrzywione nogi umożliwiają szerszy rozstaw podstawy, aby uzyskać dostęp do dużych krzeseł lub wózków inwalidzkich.
- Haki na opatentowanym wieszaku zawsze zapewniają bezpieczne i proste mocowanie podwieszki, bez użycia siły; wystarczy pociągnąć pasek podwieszki w dół, aby zamknąć i do góry, aby otworzyć.
- Ergonomiczny pilot, łatwy w użyciu.

### ZALETY

- Zakres podnoszenia od 680 mm do 1980 mm.
- Elektryczna regulacja podstawy jezdnej o maksymalnym rozstawie 920 mm (może być stosowana zarówno z szerokimi krzesłami, jak i wózkami inwalidzkimi).
- Wąska i stabilna podstawa, które mieści się w drzwiach o szerokości zaledwie 700 mm.
- EASY CLEAN – łatwe czyszczenie, powierzchnie gładkie i bez konturów.
- Siłownik Linak i sterownik Lift 40+ z OneConnect™



Wszystkie rodzaje wieszaków na podnośniku Solar można łatwo przechylać i obracać o 360°



Przyjazny dla użytkownika pilot i sterownik Linak.



Sygnalizacja LED na sterowniku z informacją o akumulatorze i ładowaniu, serwisie, stanie systemu (przeciążenie, zatrzymanie awaryjne itp.).



Solar ze standardowymi kołami

Solar z obniżoną podstawą

Zestaw Low rider – obniżona podstawa, który zmniejsza wysokość nóg o 32 mm. Jest to zestaw akcesoriów składający się z czterech kół.



Ręczne awaryjne opuszczanie.



Użyj pętli paska, aby otworzyć i zamknąć haczyk przed i po użyciu



Mocowanie podwieszki: minimalny nacisk w dół blokuje hak; pociągnij w górę, aby odblokować hak.

Maksymalne obciążenie (SWL)	185 kg
Podnoszenie	Elektryczne
Rozstaw nóg	Elektryczne
Awaryjne opuszczanie	Manualne
Awaryjne zatrzymanie	Manualne
Waga całkowita (bez wieszaka)	45 kg
Wydajność baterii	60-80 podniesień (80 Kg, 0,5m)
Min. szerokość	700 mm
Waga najcięższego elementu	23,8 kg

Wersja	
Winncare Solar 185 z 2-punktowym wieszakiem	010-01403
Winncare Solar 185 z 3-punktowym wieszakiem	010-01404
Akcesoria	
2-punktowy wieszak, 48 cm	015-02126
3- punktowy wieszak	015-02106
2- punktowy wieszak, 48 cm z wagą	017-00144
3- punktowy wieszak, 48 cm z wagą	017-00143
Pilot	018-08269
Bateria	018-08264

a: 1980 mm  
b: 680 mm  
c: 1300 mm  
d: 530 mm  
e: 180 mm  
f: 360 mm  
g: 580 mm

h: 600 mm  
i: 180 mm  
j: 120 mm  
k: 50 mm  
l: 550 mm  
m: 920 mm  
n: 890 mm

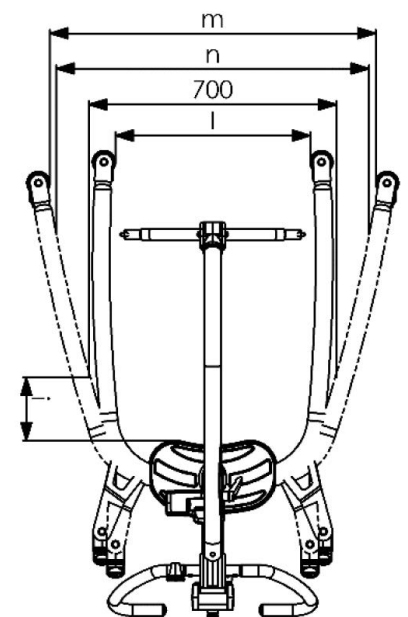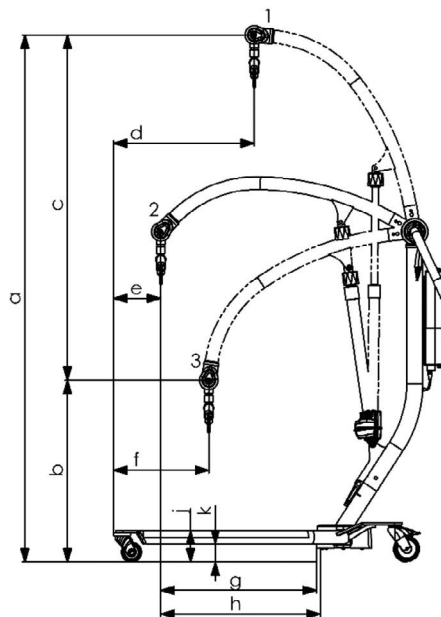

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Wszystkie dane mają charakter poglądowy i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach. Winncare Nordic zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się ze sprzedawcą.